

EcoLine

CARROS DE MEDICAMENTOS
Y PROCEDIMIENTOS



CARROS MÉDICOS ISO 6040

CONFIGURACIONES Y PERSONALIZACIÓN

PEGASUS MEDICAL

Pegasus Medical ofrece una amplia gama de carros con una variedad de accesorios disponibles.

Nuestros carros son **sólidos, personalizables y accesible**. Su estructura modular permite la reconfiguración rápida de un carro estándar a una configuración de cajón única con codificación de colores designada.

Ecoline es la solución ideal para sus necesidades de administración de medicamentos y suministros hospitalarios.

Los cajones Ecoline son compatibles con cualquier bandeja/cesto ISO 60-40. Y lo más importante, la posición de los cajones, bandejas y cestas siempre se puede reajustar.



TABLA DE CONTENIDO

OPCIÓN 1: CONFIGURACIONES PREFIJAS

Elija una configuración fija preparada por el personal de Pegasus en base a su vasta experiencia con diferentes tipos de clientes en múltiples mercados.


- 4 CARROS DE PROCEDIMIENTO
- 6 CARROS DE MEDICAMENTOS
- 8 CARROS DE AISLAMIENTO
- 10 CARROS DE ANESTESIA
- 12 CARROS DE EMERGENCIA
- 14 CARROS PARA ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILES
- 16 CARROS DE HUELLA PEQUEÑA



OPCIÓN 2: CONFIGURA TU PROPIO CARRO

Elija su propia configuración de cajones y línea de accesorios en función de su mercado objetivo y las demandas de sus clientes (página 18).

- 18 CONFIGURA TU PROPIO CARRO
- 20 ACCESORIOS PARA CARROS ECOLINE
- 22 CONFIGURACIONES DE CAJONES DE 3" - 6" - 9" (SOLO EN EE. UU.)
- 24 PROYECTOS - ESTUDIOS DE CASO

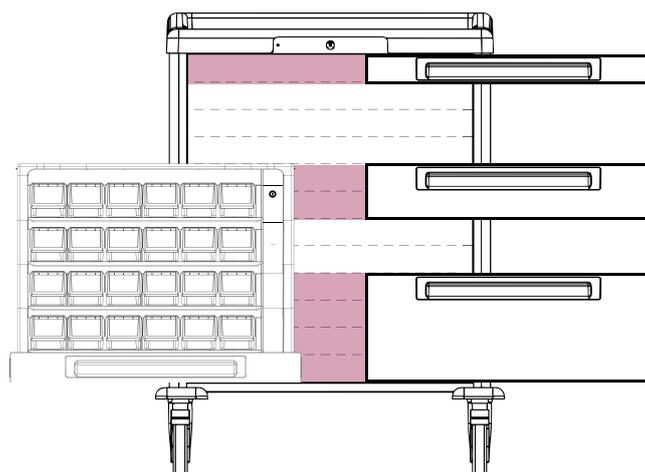

CARROS DE PROCEDIMIENTOS

Nuestro carro para procedimientos es altamente ajustable, tanto en términos de configuración de cajones como de compartimentos. El sistema es completamente modular en cuanto a papeleras y cajones, así como colores de tiradores y frentes de cajones. Todos los compartimentos de los cajones están hechos de plástico ABS y son completamente extraíbles para el reabastecimiento de existencias y la limpieza.

CARRO DE PROCEDIMIENTO PREMIUM

El carro de procedimiento Premium está configurado para el básico de 5 cajones, totalmente equipado con: cerradura con llave, porta sueros, encimera con estante lateral para aumentar fácilmente la superficie de trabajo, manija de empuje, papeleras, canasta lateral y soporte para contenedor inclinable.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera y estante lateral
- Soporte para contenedor inclinable 2
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera lateral
- Papelera



CARRO DE PROCEDIMIENTO PLUS

El carro para procedimientos Plus es similar a la configuración del carro para procedimientos Premium, pero tiene menos accesorios. Configuración diseñada para necesidades más básicas y menos complejas, pero se pueden agregar accesorios a pedido.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera lateral
- Papelera



CARRO DE PROCEDIMIENTO BÁSICO

El carro está equipado con una encimera estándar extraíble para facilitar la limpieza, con un cajón de 20 cm (8 ") y 4 cajones de 10 cm (4") para almacenamiento.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar



CARRO DE MEDICAMENTOS

El carro de medicamentos Pegasus está equipado con un cassette de medicación transferible. Este cassette de cuatro niveles contiene de 16 a 24 contenedores. Todos los contenedores se pueden bloquear. El cassette se puede bloquear al carro con el sistema de bloqueo del carro.

El cassette Med está montado sobre guías telescópicas y, por lo tanto, se puede quitar y reemplazar fácilmente.

CARRO DE MEDICAMENTOS PREMIUM

El carro de medicamentos Premium está equipado con un candado con llave, un porta sueros, una encimera, asas de empuje, una papelera y un soporte para el contenedor inclinable, y un cassette de medicamentos de cuatro niveles transferible. Este cassette de cuatro niveles contiene de 16 a 24 contenedores. Todos los contenedores se pueden bloquear. El cassette se puede bloquear al carro con el sistema de bloqueo del carro.

El cassette Med está montado en guías telescópicas y, por lo tanto, se puede quitar y reemplazar fácilmente.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- Soporte para contenedor inclinable 2
- Cassette de medicación (4 niveles)
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera



CARRO DE MEDICAMENTOS BÁSICO

El carrito de medicación predeterminada está equipado con una encimera, un cajón de 20 cm (8 ") y un cassette de medicación transferible. Este cassette de cuatro niveles contiene de 16 a 24 contenedores. Todos los contenedores se pueden bloquear. El cassette se puede bloquear al carro con el sistema de bloqueo del carro.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- Cassette de medicación (4 niveles)



Los cassettes cumplen con la norma ISO y se ajustan a la variedad de diferentes sistemas de almacenamiento de Pegasus.



CARROS DE AISLAMIENTO

El carro de aislamiento tradicionalmente se marca en amarillo para facilitar su identificación. El marcado amarillo se puede hacer instantáneamente agregando manijas ergonómicas amarillas o usando frentes de cajones amarillos a todo color.

CARROS DE AISLAMIENTO PLUS

El carro de aislamiento plus se marca tradicionalmente en amarillo para facilitar su identificación. El carrito generalmente tiene 4-5 cajones y está equipado con: cerradura con llave, encimera, manija, papelera y canasta lateral. El carro se puede desinfectar rápida y fácilmente utilizando protocolos y desinfectantes estándar.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- Asas de empuje
- Papelera
- Porta Guantes Trio
- Soporte para botella de líquido desinfectante



CARRO DE AISLAMIENTO BÁSICO

El carro de aislamiento predeterminado se marca tradicionalmente en amarillo para facilitar su identificación. El marcado amarillo se puede hacer instantáneamente agregando manijas ergonómicas amarillas o usando un frente de cajón amarillo a todo color.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar



CARROS DE ANESTESIA

Nuestros carros de anestesia se pueden configurar con el diseño básico de 5 cajones o la estación de anestesia móvil de 10 cajones de gran capacidad. Los cajones se pueden dividir fácilmente en hasta 40 compartimentos para satisfacer las necesidades de almacenamiento de medicamentos.

Se pueden agregar muchos accesorios proporcionados por Pegasus o proveedores externos si es necesario, incluidos brazos de monitor, bombas, etc.

CARRO DE ANESTESIA PREMIUM

La Anestesia Premium está configurada para el cajón básico de 5 cajones, totalmente equipada con: cerradura con llave, porta sueros, encimera con estante lateral para aumentar fácilmente la superficie de trabajo, manija de empuje, papelera y soporte para contenedor inclinable.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera y estante lateral
- Soporte para contenedor inclinable 2
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera lateral
- Papelera



CARRO DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE ANESTESIA PREMIUM

El carro de la estación de trabajo de anestesia premium está configurado para la estación de trabajo móvil de 10 cajones de gran capacidad. Los cajones se pueden dividir fácilmente en hasta 40 compartimentos para satisfacer las necesidades de almacenamiento de medicamentos.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- Soporte para contenedor inclinable 2
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera lateral
- Papelera



CARROS DE EMERGENCIA

El Pegasus Medical Crash Cart se identifica fácilmente por sus frentes de cajón de color rojo brillante.

El carro de emergencia está equipado con un bloqueo de seguridad que permite un control del 100% del stock almacenado en el carro, entre los procedimientos de RCP.

PREMIUM EMERGENCY CART

El carro de emergencia Premium se identifica fácilmente por sus frentes de cajón de color rojo brillante. El carro está completamente equipado con: cierre de sellado, portasueros, encimera, asa de empuje, papelera, brazo desfibrilador, tablero cardíaco y soporte para contenedor inclinable.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera
- Brazo desfibrilador
- Tablero cardíaco



Parte trasera del carro



CARRO PEDIÁTRICO

El carro de emergencia pediátrico se proporciona con un juego de manijas ergonómicas codificadas por colores y un candado separable. Los frentes de los cajones del carro pueden ser rojos o blancos y la codificación Breslow se proporciona con agarraderas de diferentes colores.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera y estante lateral
- Sello de bloqueo
- Mangos con codificación de colores
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera
- Brazo desfibrilador
- Tablero cardíaco
- Cilindro de oxígeno



ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL

La estación de trabajo móvil Pegasus incorpora una capacidad de almacenamiento extremadamente alta (10 cajones) con excelente movilidad. Puede servir como una solución estacionaria en una sala de UCI o CCU y se puede reemplazar fácilmente con un carrito limpio cuando llegan nuevos pacientes a la habitación. Estas soluciones móviles eliminan la necesidad de armarios fijos de madera o melamina que absorben la humedad y crean un terreno fértil para la contaminación.

ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL PREMIUM

La estación de trabajo Pegasus Medical Premium Mobile incorpora una capacidad de almacenamiento extremadamente alta (10 cajones) con excelente movilidad.

Accesorios incluidos en la configuración

- Tapa de galera
- Soporte para contenedor inclinable 2
- IV Pole
- Papelera
- Porta Guantes Trio



ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL PLUS

El carro de Pegasus, estación de trabajo móvil plus es similar a la estación de trabajo móvil solo si hay un ligero cambio en la cantidad de accesorios. Configuración diseñada para necesidades más básicas y menos complejas, pero se pueden agregar accesorios a pedido.

Accesorios incluidos en la configuración

- Tapa de galera
- IV Pole
- Papelera



CARROS QUE OCUPAN POCO

Los carros Pegasus que ocupan poco espacio están diseñados en base a los módulos de 30X40 cm (sistema medio ISO). Estos carros son extremadamente ligeros y maniobrables y, por lo tanto, se adaptan perfectamente a las rondas de enfermeras, los procedimientos de recolección de muestras de sangre y las maniobras entre las camas de los pacientes.

CARRO PEQUEÑO PREMIUM

El carro pequeño premium de Pegasus diseñado en base a los módulos de 30x40cm (12 "x16") (sistema medio iso) con 5 cajones: 4 cajones de 10cm (4 ") y 1 cajón de 20cm (8").

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera y estante lateral
- Soporte de papelera inclinable 2
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera lateral
- Papelera



CARRO PEQUEÑO PLUS

El carro pequeño plus de Pegasus es similar al carro premium solo si hay un ligero cambio en el número de accesorios. configuración diseñada para necesidades más básicas y menos complejas, pero se pueden agregar accesorios bajo pedido.

Accesorios incluidos en la configuración

- Encimera estándar
- IV Pole
- Asas de empuje
- Papelera lateral
- Papelera



SELECCIONE UN TIPO DE CARRO

SELECCIONE UN TIPO DE CARRO



CRT-M31

L77cm | D56cm | H79cm
L30.5" | D22" | H31"




CRT-M35

L77cm | D56cm | H89cm
L30.5" | D22" | H35"



CRT-M39

L77cm | D56cm | H99cm
L30.5" | D22" | H39"

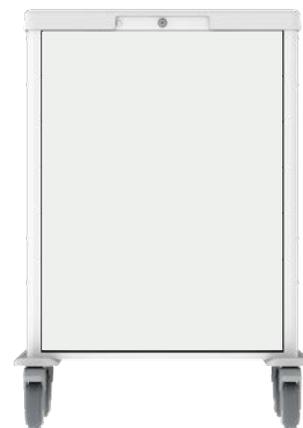

CRT-M43

L77cm | D56cm | H109cm
L30.5" | D22" | H43"



CRT-MUU39

L104cm | D75.5cm | H104cm
L41" | D30" | H41"



CRT-NM35

L47cm | D55.5cm | H88.5cm
L18.5" | D22" | H33.7cm



CRT-NM39

L47cm | D55.5cm | H100.5cm
L18.5" | D22" | H39.6"



CRT-NM43

L47cm | D55.5cm | H112.5cm
L18.5" | D22" | H44.3"

ELIGE LA PARTE SUPERIOR

Los carros Ecoline le ofrecen una selección de 3 encimeras diferentes:

A Encimera estándar **B** Tablero de gabinete de 3 lados y **C** estante lateral superior de gabinete.

La altura final total de su carro Ecoline depende de la encimera que elija de la siguiente manera:

TABLA DE ALTURA:

		CRT-M31KL	CRT-M35KL	CRT-M39KL	CRT-M43KL
A	ENCIMERA ESTÁNDAR #CRTA-TOPPC-ST	79cm (31")	89cm (35")	99cm (39")	109cm (43")
B	ENCIMERA TOP DE GALERÍA DE TRABAJO #CRTA-TOPPC-3SGT	84cm (33")	94cm (37")	104cm (41")	114cm (45")
C	GALERÍA DE 3 LADOS Y ESTANTE LATERAL #CRTA-SLSHLF-R	89cm (35")	99cm (39")	109cm (43")	119cm (47")

Tapas para carro de tamaño reducido



POR DEFECTO

O



CRTA-NM-SLSHLF-R

Parte superior para estación de trabajo




POR DEFECTO

SELECCIONE CAJONES

Carros Ecoline - configuraciones de frente de cajón

Ecoline ofrece una selección de 3 alturas de cajón. Cada una de estas alturas utilizará una serie de unidades espaciales. Una unidad de un solo espacio alcanza la altura de un cajón de 2 "(5 cm)

12 UNIDADES ESPACIALES

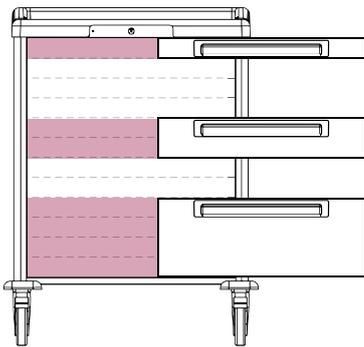


Cajón de 2 "(5 cm) = 1 unidad espacial

Cajón de 4 "(10 cm) = 2 unidad espacial

Cajón de 8 "(20 cm) = 4 unidad espacial


12 UNIDADES ESPACIALES

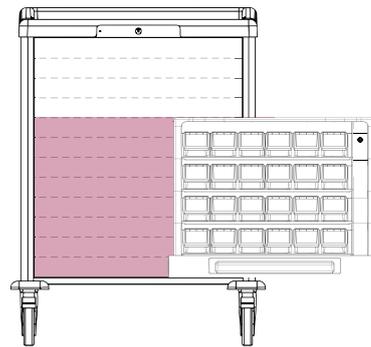

Cassettes de medicación
4 Lvl = 8 Unidades espaciales


Seleccione la altura deseada de sus carros. Ecoline ofrece 4 alturas de carro estándar, cada una con un número específico de unidades de espacio disponibles:

8 UNIDADES ESPACIALES

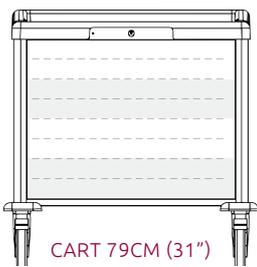


CART 79CM (31")
TIENE 8 UNIDADES ESPACIALES

10 UNIDADES ESPACIALES

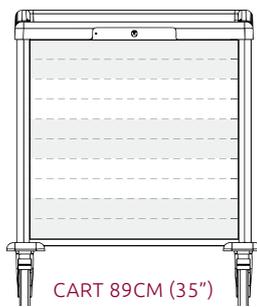


CART 89CM (35")
TIENE 10 UNIDADES ESPACIALES

12 UNIDADES ESPACIALES

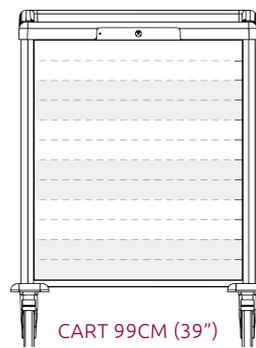

CART 99CM (39")
TIENE 12 UNIDADES ESPACIALES

14 UNIDADES ESPACIALES

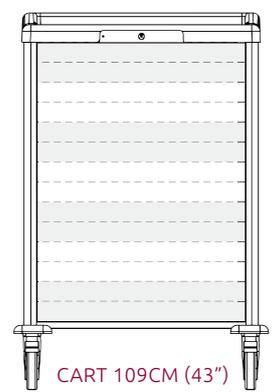

CART 109CM (43")
TIENE 14 UNIDADES ESPACIALES

Seleccione las alturas de cajón que se adapten a sus necesidades. Empiece desde arriba con el cajón de 5 cm (2 pulgadas), seguido del cajón de 10 cm (4 pulgadas) y el cajón de 20 cm (8 pulgadas). Los cajones más altos siempre están en la parte inferior. Asegúrese de que la suma de las unidades de espacio de sus cajones sea igual al número específico de unidades de espacio disponibles en su carro.

SELECCIONE EL COLOR DEL KIT

Todos los mangos vienen en un paquete de 90 unidades (excepto el juego Pediátrico)



VERDE



AZUL OSCURO



RUBÍ



BEIGE



GRIS CLARO



LAVANDA



CONJUNTO PEDIÁTRICO

Para el tipo E

CRTA-MKHND-TE

CRTA-MKHND-DB

CRTA-MKHND-RU

CRTA-MKHND-LG

CRTA-MKHND-LAV

CRTA-MKHND-BRS-SET

Para tipo UU & U

CRTA-NMHND-TE

CRTA-NMHND-BE

CRTA-NMHND-LG

CRTA-NMHND-LAV

(Por defecto - RAL 7035)

ACCESORIOS

CERRADURAS

CERRADURAS ELECTRÓNICAS RFID

#Número de artículo
Cerradura electrónica RFID
con cuatro dígitos
Código de usuario



COMBINACIÓN CON CERRADURA

#CRTA-MK39/43ELKIT
Cerradura electrónica
de cuatro dígitos
Código de usuario



CERRADURA DE LLAVE

Proporcionado como
estándar



SELLO DE BLOQUEO

#CRTA-BRO-LOCK
Bloqueo de ruptura / sello



ACCESORIOS

CARRIL DE ACCESORIOS DE ALUMINIO

#CRTA-SRAIL-MK/NM
Para montar varios accesorios
en carros



CARRIL DE ACCESORIOS DE ALUMINIO MUU

#CRTA-SRAIL-MUU39
Para montar varios accesorios
en carros MUU



PAPELERA

#CRTA-WSBIN
Papelerera, grande – 10L
Con soporte 26x20x36.5cm
(10.4x8x14.6")



CAJA DE CATÉTER LATERAL *

#CRTA-CATH-HLD
10,2x10,2x45 cm (4x4x18")
Cajas de acero con panel
flexiglass
Requiere dos carriles de
accesorios



PAPELERA LATERAL

#CRTA-SBASKET
Papelerera lateral de alambre
44x16x19cm (17.6x6.4x7.6")



ERGONOMICOS

PUSH HANDLE

#CRTA-ALPH-MK/NM
Aluminum 40cm (16")



ASAS DE EMPUJE

#CRTA-ALPH-MUU39
Aluminio 60cm (24")



GANCHOS PARA CARRIL DIN

DIN-HKS-GBH-SET
Un juego de 2 ganchos para colgar
en el carril DIN para el soporte de la
guantero y el soporte de la botella



SOPORTE PARA BOTELLA DE LÍQUIDO DESINFECTANTE

#DLBH-PP + #DIN-HKS-GBH-SET
Simple, oculto, haga clic para abrir
Mechanizim
Máx.: 7 cm de diámetro de la
botella



NEW

PORTA GANTES

#S-GBH-ABS +
#DIN-HKS-GBH-SET
Para sostener un desechable
Tamaño máximo de la caja:
14,5X24,5X8 cm



NEW

SOPORTE PARA GANTES TRIO

#TR-GBH-ABS + #DIN-HKS-GBH-SET
Para contener 3 desechables
Tamaño máximo de la caja:
14,5X24,5X8 cm
Requiere dos accesorios de carril



NEW

MÁS ALMACENAMIENTO

SOPORTE PARA CONTENEDOR INCLINABLE 2

#CRTA-TBH-2

Contenedor inclinable para 2 filas
Altura sobre el carro: 62,1 cm (24,8")



SOPORTE PARA CONTENEDOR INCLINABLE 3 **

#CRTA-TRL-3

Contenedor inclinable para 3 filas
Altura sobre el carro: 86cm (34,4")



CONTENEDOR INCLINABLE 4

#TILTBIN-4

60 cm de ancho



CONTENEDOR INCLINABLE 5

#TILTBIN-5

60 cm de ancho



CONTENEDOR INCLINABLE 6

#TILTBIN-6

60 cm de ancho



CONTENEDOR INCLINABLE 3

(para carro de pequeño tamaño)

FLEX-BIN-DL

30 cm de ancho



MARCO PLEGABLE

#CRTA-SFRAME-FL

Para estante lateral # SHELF-HPL3040

Para bandeja lateral # T103040

Para bandeja lateral pequeña # T053040

Para cesta lateral # B103040



EMERGENCIA

IV POLE

CRTA-IVPOLE-HA

Porta sueros regulable en altura
Altura máxima 188 cm (74")



TABLERO CARDÍACO

#CRTA-CARBACKB

Con ganchos para colgar acrílico 51x44 cm
(20,4x17,6")



BRAZO DESFIBRILADOR

#CRTA-SDIFARM

Brazo desfibrilador giratorio de acero con recubrimiento de polvo



CILINDRO DE OXÍGENO

#CRTA-OXBH1

Cilindro de oxígeno lateral
Alambre de acero recubierto de PVC
Requiere dos accesorios de carril



SOPORTE PARA CONTENEDOR DE PELIGRO

#CRTA-HAZB-HL

Acero pintado en polvo



SELLO DESECHABLE

#PSSEAL-R

Sello desechable, 100 PCS por paquete



CONFIGURACIONES 3" - 6" - 9"

Nuestro carro Ecoline también está disponible en tamaños de cajones de EE.UU. de 3", 6" y 9" de profundidad.


(Disponible solo para clients de N.A)




Carros Ecoline – Configuraciones frontales de dibujo de EE.UU.

El estándar EE.UU. de Ecoline ofrece una selección de 3 alturas de cajón. Cada una de estas alturas utilizará una serie de **unidades espaciales**. Una unidad de un solo espacio corresponde a la altura de un cajón de 3 “.


Mire los esquemas a continuación:

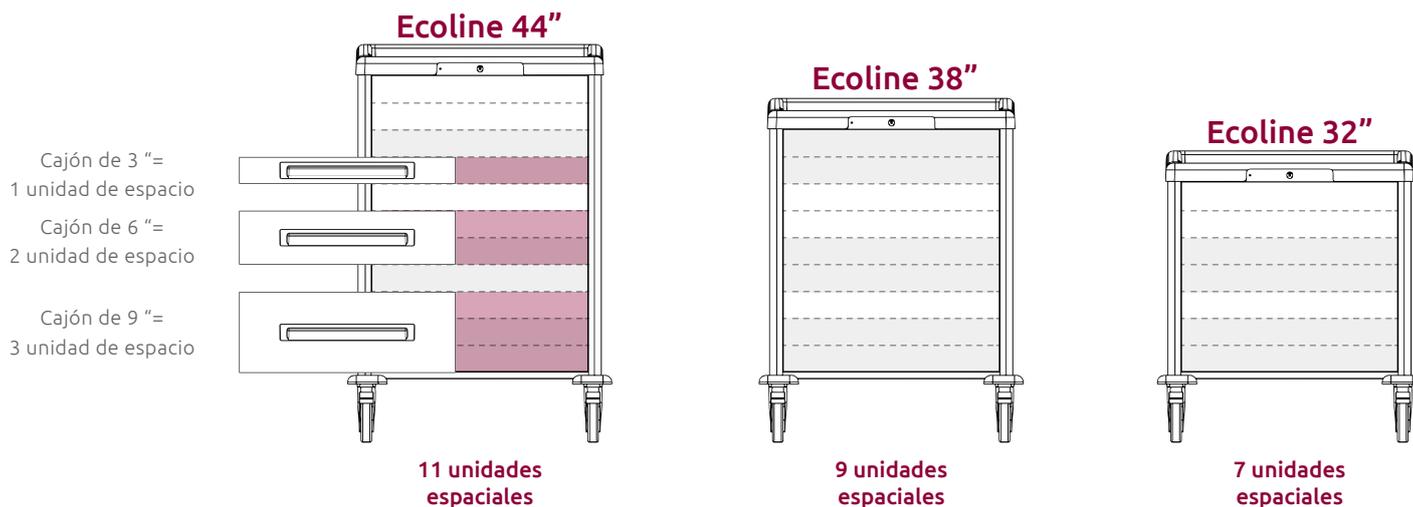


Configuraciones de altura de 44" de Ecoline

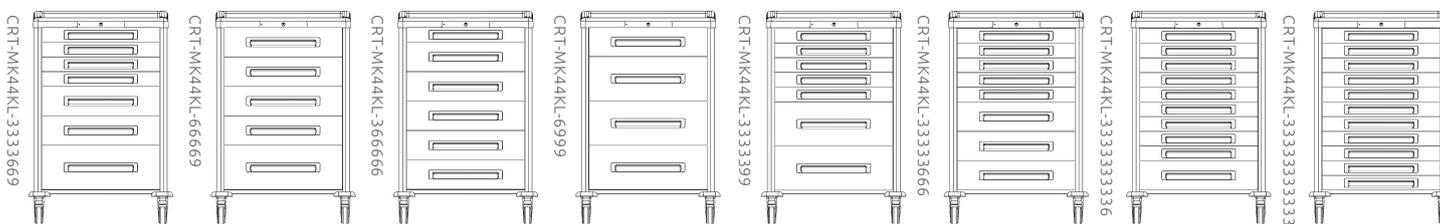

Configuraciones de altura de 38" Ecoline

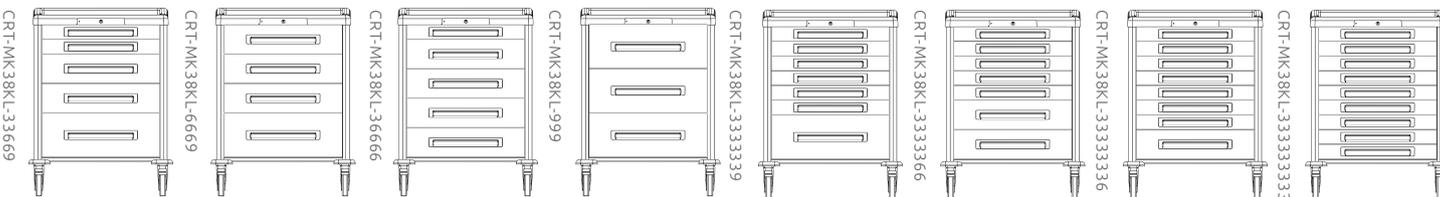

Configuraciones de altura de 32" de Ecoline

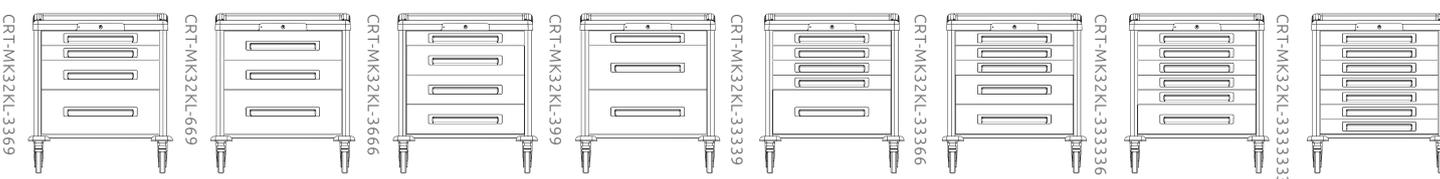

Hospital Erasmus MC en los Países Bajos

Aproximadamente 400 carros Ecoline en total se desarrollaron a medida para todos los departamentos específicos dentro del Erasmus MC. Los usuarios de los diferentes departamentos recibieron formularios en los que podían configurar completamente sus propios carros a sus deseos, como la disposición de los carros y los accesorios.



Estación de trabajo de fundición móvil Ecoline

Se personalizó una estación de trabajo Ecoline de color plateado con una superficie de trabajo de acero inoxidable y un contenedor lateral de acero inoxidable, para ser utilizada como una estación de trabajo de fundición móvil.



Carro de sedación Ecoline

Instalación personalizada del carro Ecoline en el entorno del quirófano, incluidos brazos de computadora dedicados y múltiples enchufes eléctricos.



Ecoline todo en uno

Una gran instalación de carros de distribución de medicamentos Ecoline con brazo Vesa dedicado, computadora, kit de fuente de alimentación y bloqueo RFID.





CONTÁCTENOS PARA MÁS DETALLES

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

USA / CANADA
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

EUROPE / ORIENTE MEDIO / ASIA
V. Croda Granda 13a 31027
Spresiano (TV) - Italy