

HYGIEIA СИСТЕМА СТЕЛАЖЕЙ



EGASUS
MEDICAL CONCEPTS INC.



**ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНАЯ И ЛЕГКО ОЧИЩАЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА СТЕЛАЖЕЙ
ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО БЛОКА**



О НАС

Pegasus Medical является партнером ведущих медицинских организаций и больниц на пяти континентах.

Pegasus Medical является партнером ведущих медицинских организаций и больниц на 5 континентах.

Наши клиенты рекомендуют наши продукты и технологии, поскольку мы значительно упрощаем управление медицинскими материалами с помощью гибких и масштабируемых решений. Мы обеспечиваем значительную экономию средств и поддерживаем нашу методологию с непревзойденным опытом и поддержкой

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

PeaceHealth



4 Больницы в Канбан, объем от 100 до 500 стелажей

US Naval Ships



USNS Mercy & Comfort, около 900 стелажей

US Naval Hospitals



10 объектов в Канбан, всего 2650 стелажей

Veterans Administration



Канбан и система хранения высокой плотности, более 30 объектов с 7000+ стелажей

Penn Presbyterian Med Ctr



250 стоек. Канбан и цветовая кодировка

NYC Health+Hospitals



4 больницы Канбан. 2200+ стелажей

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ HYGIEIA БЫЛА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТЕЛЛАЖНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ВЫСОЧАЙШИХ СТАНДАРТОВ ОЧИСТКИ

Лучше всего подходит для вашей операционной и центральной стерилизационной. Hygieia также может быть использована в любом другом месте хранения по всей больнице

Система стеллажей Hygieia обладает уникальными характеристиками, которых нет у других аналогичных систем на рынке.

ГЕРМЕТИЧНАЯ СТРУКТУРА

Система стеллажей Hygieia представляет собой полностью герметичную систему, в конструкции рам нет открытых отверстий, поэтому все поверхности доступны для очистки.


МАТЕРИАЛЫ

Вся система изготовлена из алюминия с порошковым покрытием; поэтому его можно очищать различными жидкостям

Вы знали?!

Гиги́я (Hygieia), одна из двух греческих богинь медицины / здоровья – богиня «профилактической» медицины, в отличие от ее сестры Панакеи, богини «лечебной» медицины



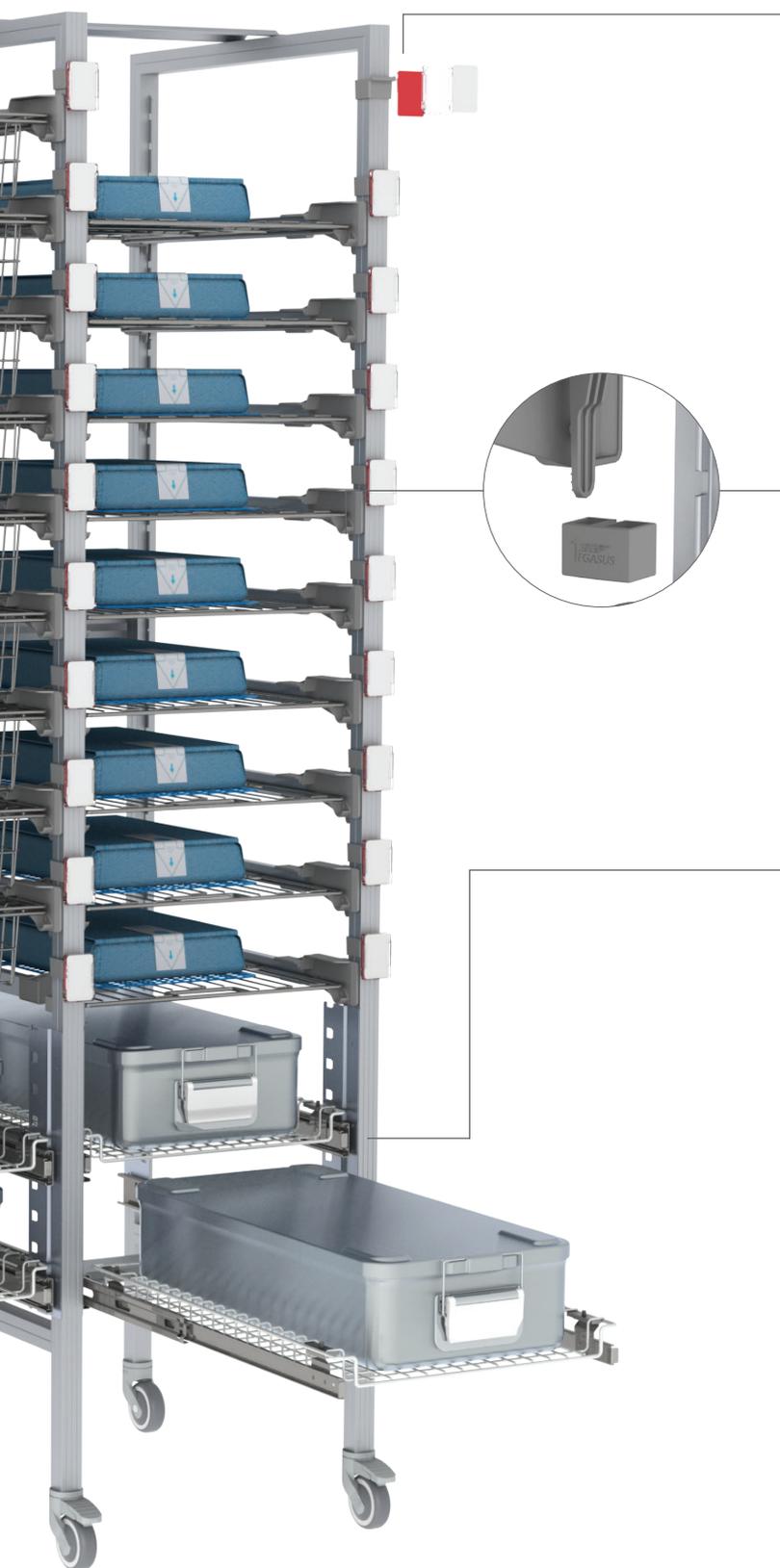

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

При удалении определенной полки или корзины соответствующая этикетка остается на раме, отмечая исходное положение, поэтому расходные материалы также возвращаются в то же место. Это поддерживает систему маркировки и в то же время позволяет мыть подносы и полки

100% МОДУЛЬНОСТЬ

Эта полностью модульная система обеспечивает возможность реконфигурации корзин и полок без использования инструментов, как для стандартных реек, так и для большегрузных телескопических направляющих.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Нужная может оснащаться как телескопическими направляющими (для нагрузок свыше 10 кг), так и стандартными пластиковыми направляющими с горизонтальным и наклонным положением

МГНОВЕННАЯ СБОРКА


Простая сборка и модификация по мере необходимости

СТЕЛЛАЖ HYGIEIA

СТЕЛЛАЖ HYGIEIA ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ДВУХ ОРИЕНТАЦИЯХ: U-ТИП И E-ТИП


Эти две ориентации позволяют нам проектировать максимальную емкость хранилища в пределах данной площади. U-тип обеспечит больше места для хранения на й стене, а E-тип улучшит видимость продуктов и обеспечит решение для узких коридоров.

U-ТИП

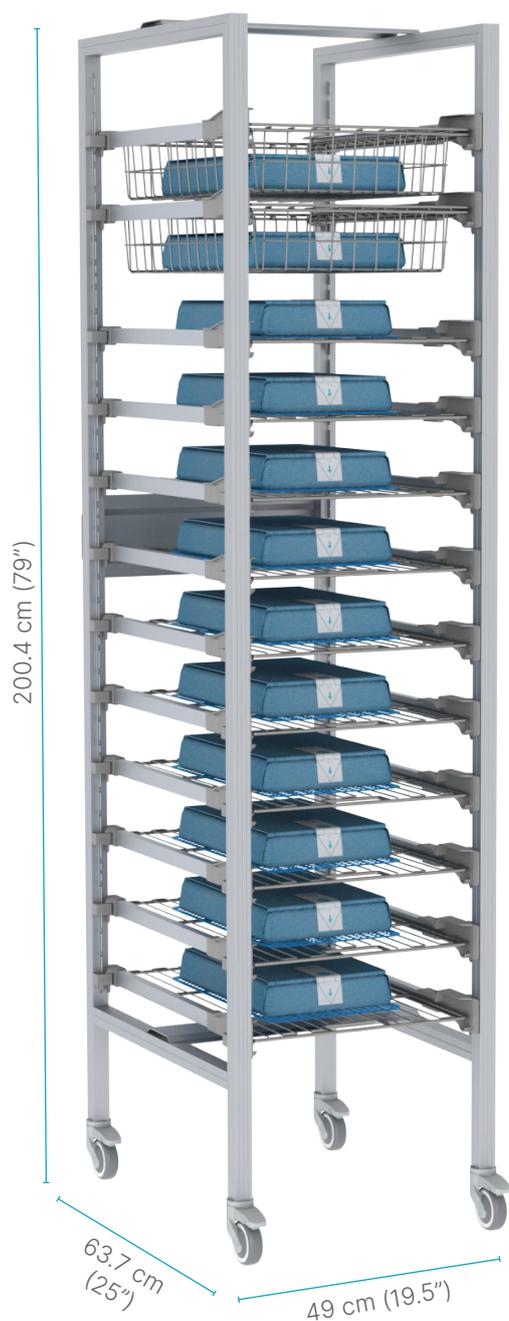

U-тип ориентации корзины:
40 см (15,7 ") в ширину и 60
см (23,6") в глубину

E-ТИП

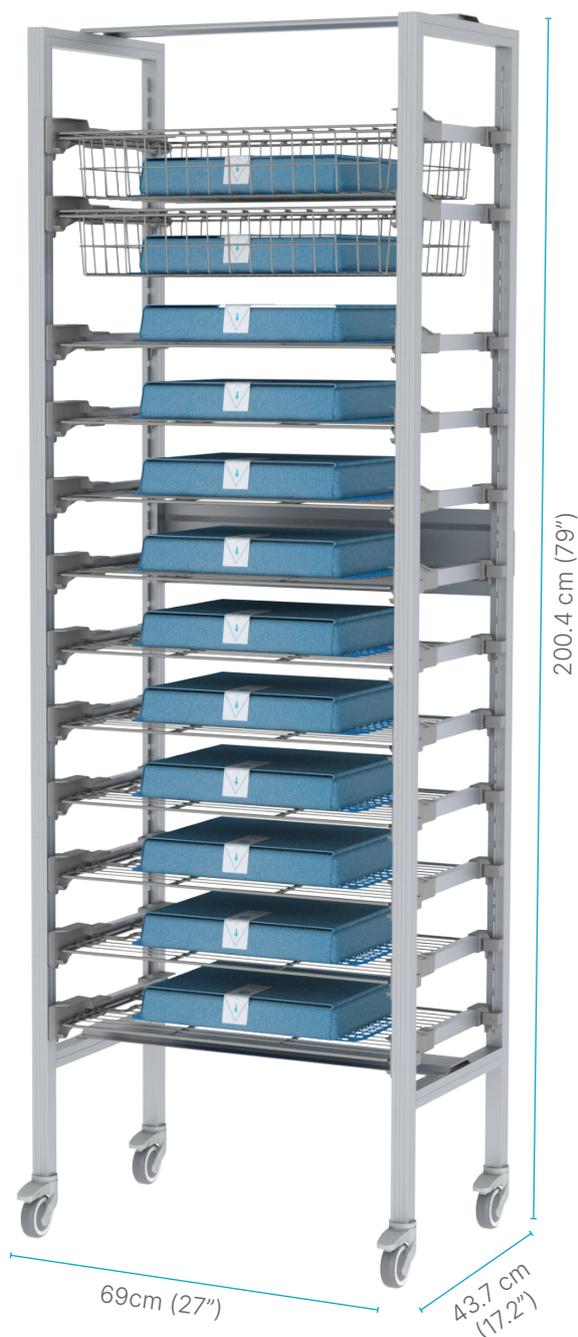

E-тип ориентации корзины:
60 см (23,6 ") в ширину и 40 см
(15,7") в глубину

Для стеллажей Hugiëia предлагается специальные полки / корзины из нержавеющей стали для стерильной упаковки и транспортировки стерильных принадлежностей.



Контейнеры и стерильные упаковки можно легко найти с помощью схемы цветовой кодировки



На следующем рисунке CAD показана типичная установка стеллажей Hugiëia в среде хранения ЦСО. Длинные стены оснащены стеллажами U-типа на колесах, в группах по 3 единицы, что позволяет легко маневрировать ими в целях очистки. Центральная часть комнаты оборудована стеллажами E-типа, тыльными сторонами друг к другу, что позволяет сохранить полезное пространство коридора для перемещения тележки между ними.

ТЕЛЕЖКА HYGIEIA

ТЕЛЕЖКА ОТКРЫТОЙ РАМЫ HYGIEIA - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО / ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕРИЛЬНЫХ ПАКЕТОВ, СТЕРИЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И / ИЛИ КОНТЕЙНЕРОВ, ВНУТРИ ЦСО ОПЕРАЦИОННОЙ ИЛИ ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ТЕЛЕЖКА ЗАГРЯЗНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАЦИОННОГО набора для ЦСО

Нестерильная зона

HYG-CRT160-1-OP




ЧИСТАЯ/СТЕРИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

ЦСО в СКЛАД ЦСО в центр


операционного отделения

HYG-CRT160-1-OP

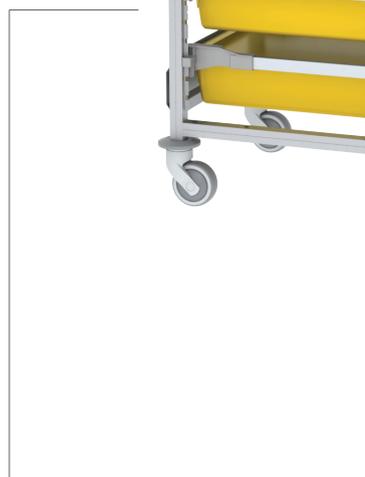

 Тележка загрязненного оборудования




Открытые тележки с желтыми модулями с высокой устойчивости обычно используются для транспортировки отработанных загрязненных инструментов из операционных / процедурных комнат обратно в центральную стерилизационную.

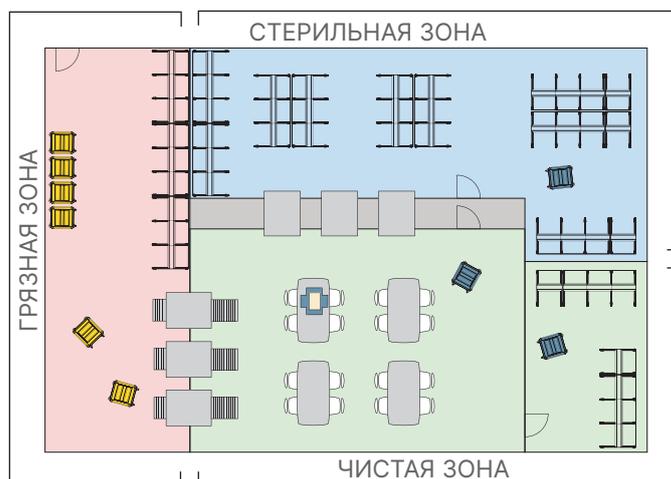

 Чистая/стерильная тележка

Открытые тележки со стерильными упаковками будут использоваться в стерильной среде и «чистых» коридорах между ЦСО и помещениями хранения ЦСО или чистым центром операционной.

ТЕЛЕЖКА ГИГИЕНА РАЗМЕРЫ

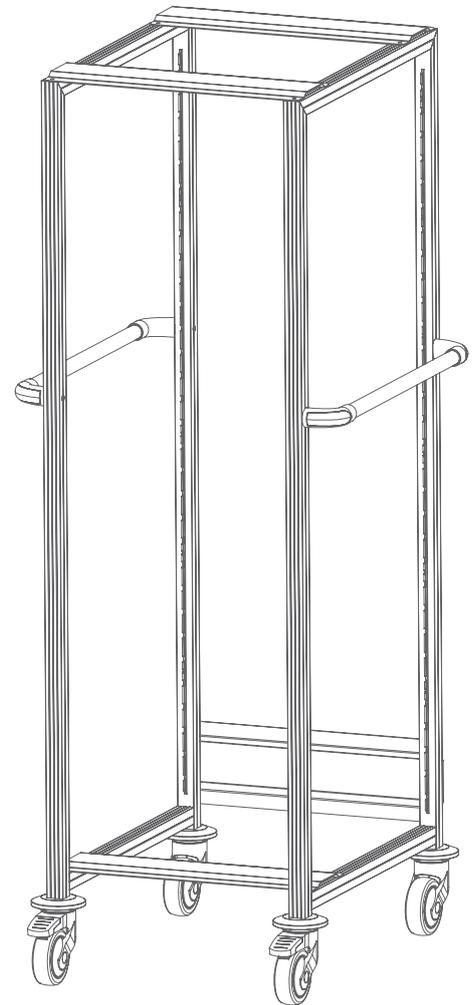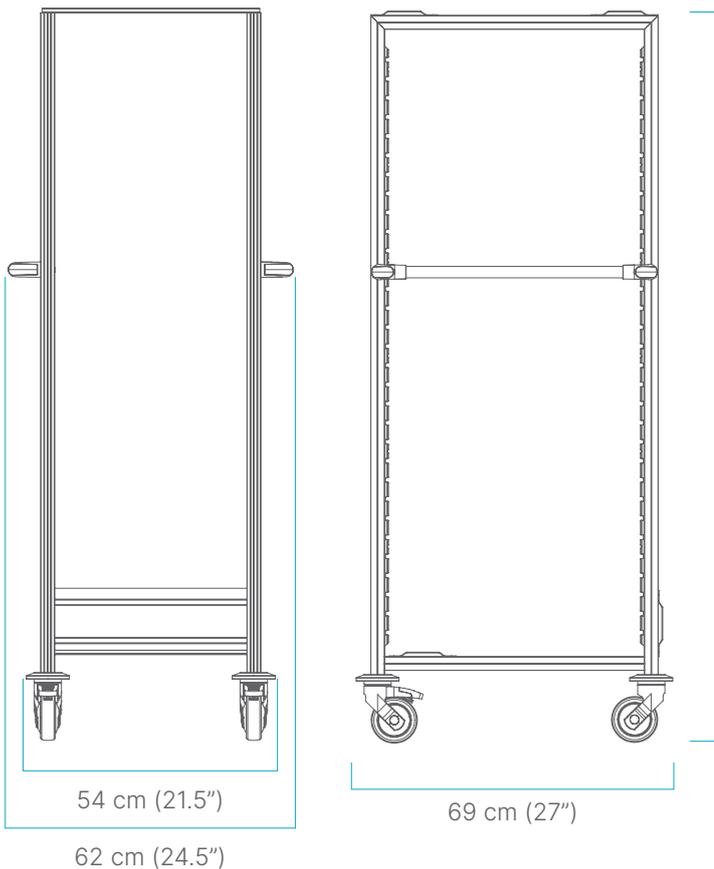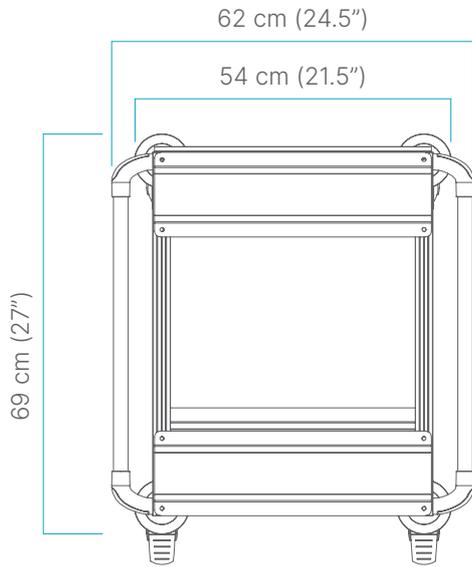

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

РЕЙКИ



ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕК

Держатель для рельсов на Hygieia

HYG-TRAIL-HLD



РЕЙКИ

могут выдвигаться вперед в горизонтальном или наклонном положении



U-тип Реек

Левая: HYG-TRAIL-U-L

Правая: HYG-TRAIL-U-R

E-тип реек

Левая: HYG-TRAIL-E-L

Правая: HYG-TRAIL-E-R

ДВУХСТОРОННИЕ РЕЙКИ

Корзины можно вытаскивать с обеих сторон стеллажа / тележек



U-ТИП РЕЕК
HYG-TRAIL-U-DS

E-ТИП РЕЕК
HYG-TRAIL-E-DS

«ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ» КОЛЕСА

Опционально для более плавного скольжения корзины

«ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ»
КОЛЕСА
PNWL-SET



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ РЕЙКИ

Для использования с контейнерными полками 100% расширение (10 шт. в упаковке)



U-ТИП
BBG-RK-U

E-ТИП
BBG-RK-E

NO Touch™ АКЦЕССУАРЫ


Сопутствующие аксессуары



Сетчатая корзина из нержавеющей стали
60X40 см (24 "X16") | высота - 10 см
WS-B104060-SS-WH



Сетчатая полка из нержавеющей стали 60X40см
(24 "X16")
SSS-6040WH

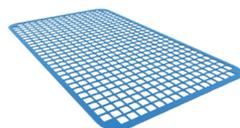

Нескользящий силиконовый коврик
42X25см (16.5"X9.8")
SIMAT-250X420




Ручка из нержавеющей стали для сетчатой корзины
WS-HANDLE-SS-FBS



Сетчатая корзина из нержавеющей стали
60X40 см (24 "X16") | Высота 20 см (8 дюймов)
WS-B204060-SS



Сетчатая полка из нержавеющей стали 30X40 см
(12 "X16")
SSS-3040WH

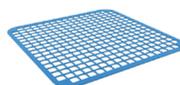


Нескользящий силиконовый коврик
25X25,5 см (9,8 "X10")
SIMAT-250X255

CS PS АКЦЕССУАРЫ



Полка для инструментов - нержавеющая сталь
WS-INSTR-SS

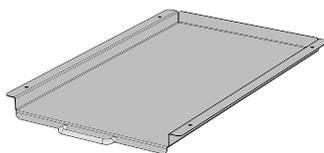

U-образная полка из нержавеющей стали
SS-U-CNT-SHELF



Матовый алюминий # HNDL-112MM-ALU
Красный # HNDL-112MM-RED Синий # HNDL-112MM-BLUE
Желтый # HNDL-112MM-YLW
(10 штук в упаковке)

ISC6040 АКЦЕССУАРЫ

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Используются для очистки в центральных стерилизационных помещениях

АНТИМИКРОБНЫЕ МОДУЛИ

Доказано, что в течение 24 часов уровень бактерий на поверхности модуля снижается до 99%.



10 см ПОДНОС - T103040-HR + LID - L3040-HR



10 см ПОДНОС - T104060-ND-HR + LID - L4060-HR



10 см ПОДНОС - T104060-AM-G + LID - L4060-AM-G





20 см ПОДНОС - T204060-AM-G + LID - L4060-AM-G

РАЗМЕРЫ

HYGIEIA E-ТИП


СИСТЕМА HYGIEIA E-ТИПА

4 рамы в упаковке: HYG-SFR-E189
9 боковых опор в упаковке:
HYG-LSU-E

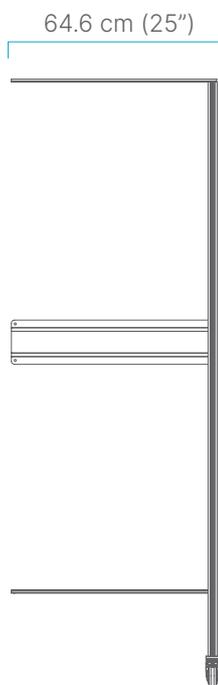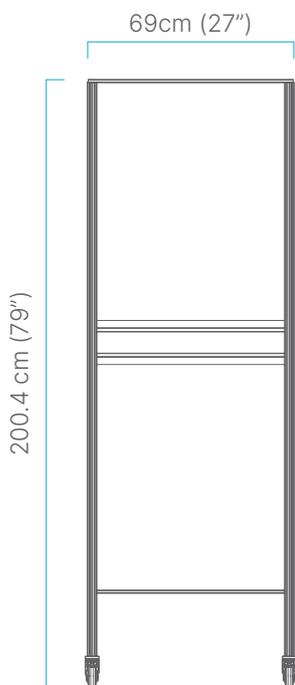


HYGIEIA С КОЛЕСАМИ

КОЛЕСА: HYG-CAS3-SET

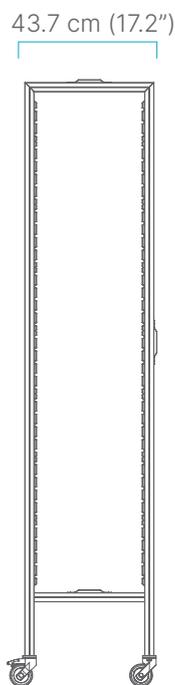

HYGIEIA С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ НОЖКАМИ



Регулировочные ножки: HYG-LVF

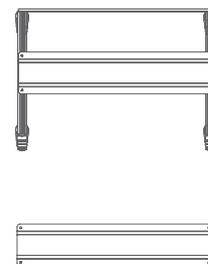

HYGIEIA U-ТИП


СИСТЕМА HYGIEIA U-ТИПА

4 рамы в упаковке: HYG-SFR-U189
9 боковых опор в упаковке:
HYG-LSU-U

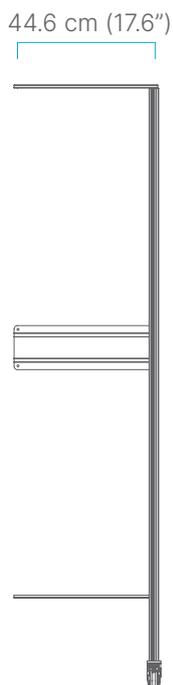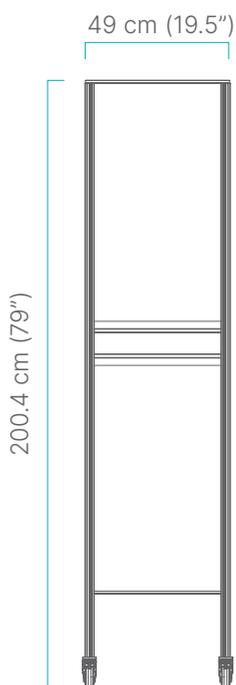



HYGIEIA С КОЛЕСАМИ

КОЛЕСА: HYG-CAS3-SET

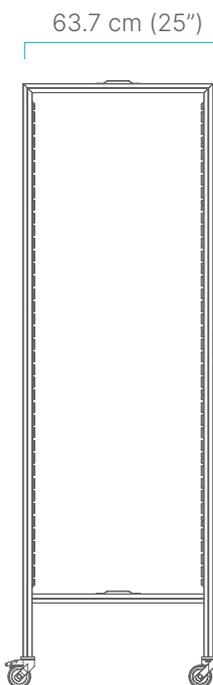


HYGIEIA С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ НОЖКАМИ


Регулировочные ножки: HYG-LVF

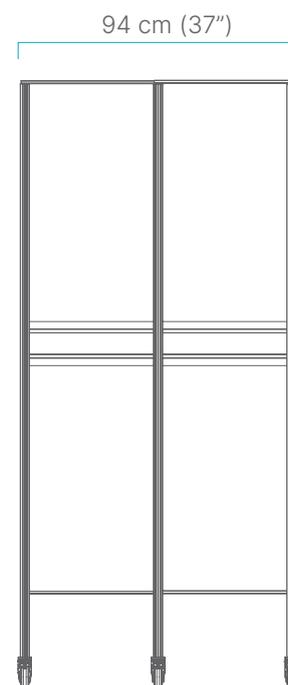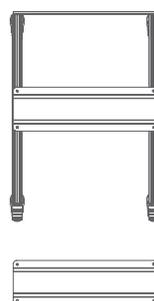


134 cm (53")

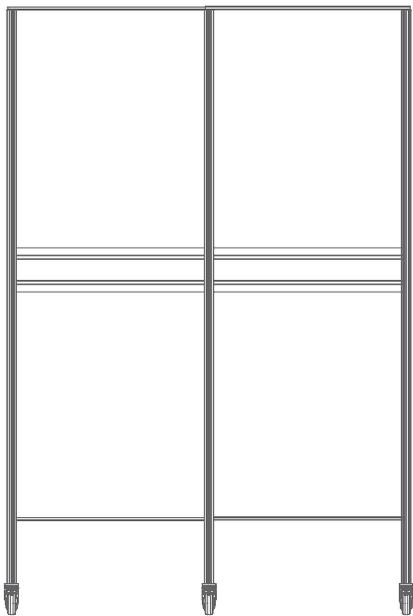


198.5 cm (78")

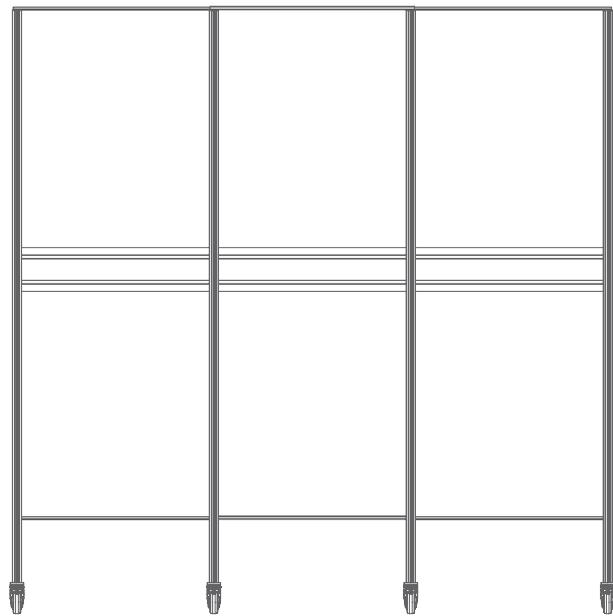

138.2 cm (55.5")

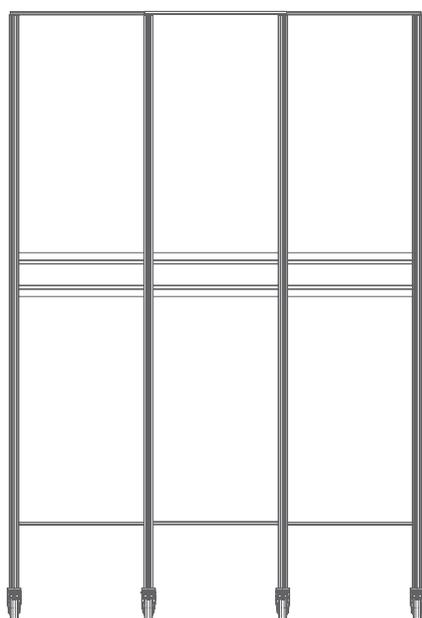

183 cm (72")

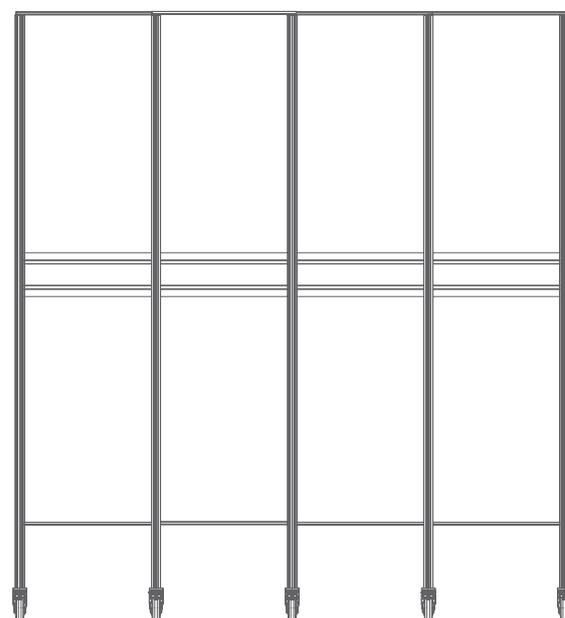


СТЕЛЛАЖ HYGIEIA ТИПА DIN

30"/60" И 60"/60"
ОЛЬКО В США

СТЕЛЛАЖИ HYGIEIA ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ В ВИДЕ СТЕЛЛАЖА И ОТКРЫТОЙ ТЕЛЕЖКИ,
КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТИПУ DIN 29,6X60 CM (11,6 "X24") И 59,6X60 CM (23,4 "X24")

(ДОСТУПНО ТОЛЬКО В США ИЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ)

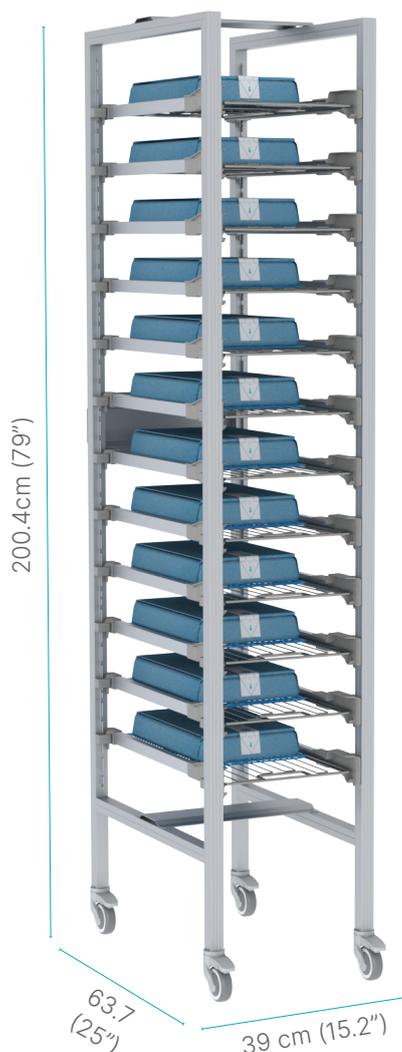

HYGIEIA DIN 3060

СИСТЕМА HYGIEIA ТИП DIN 3060

4 рамки в упаковке: HYG-SFR-U189

12 боковых опор в упаковке:

HYG-DIN-LSU-296

HYGIEIA С КОЛЕСАМИ

Колеса: HYG-CAS3-SET

HYGIEIA С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ НОЖКАМИ

Регулировочные ножки: HYG-LVF

HYGIEIA DIN 6060

СИСТЕМА HYGIEIA ТИП DIN 6060 TYPE

4 рамки в упаковке: HYG-SFR-U189

12 боковых опор в упаковке:

HYG-DIN-LSU-592

HYGIEIA С КОЛЕСАМИ


КОЛЕСА: HYG-CAS3-SET

HYGIEIA С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ НОЖКАМИ


Регулировочные ножки: HYG-LVF



Тип DIN 3060 Размеры

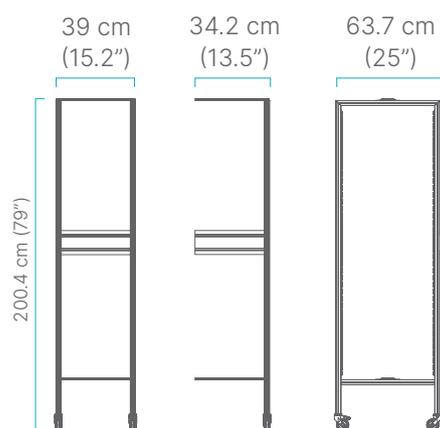




Тип DIN 6060 Размеры

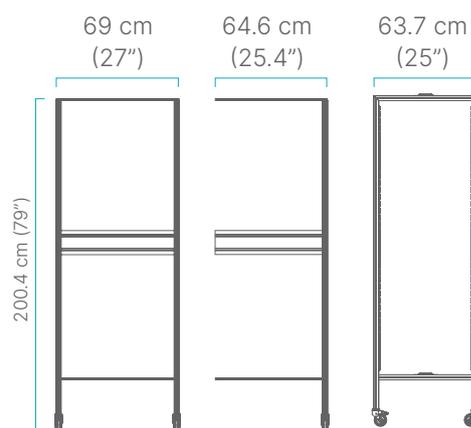

ЧИСТАЯ/СТЕРИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

ЦСО к складу ЦСО к центру
Операционного отделения

HYG-DIN-296-1-OP

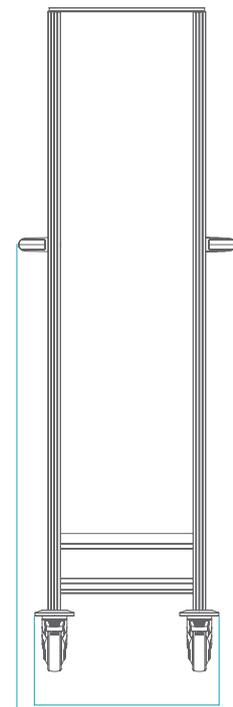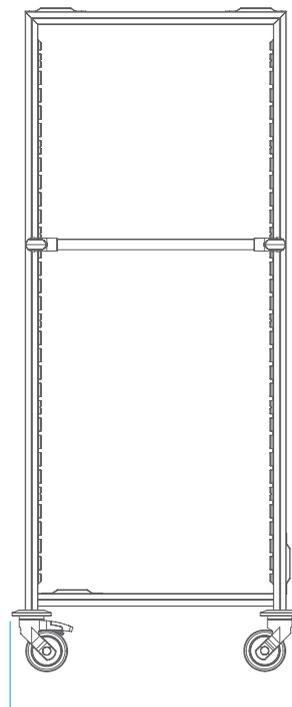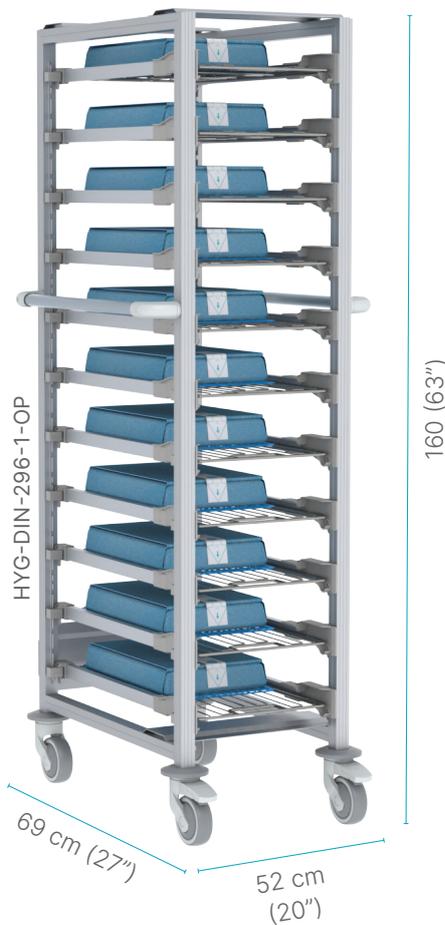

44 cm (17")

52 cm (20")

NO Touch™ АКЦЕССУАРЫ




Сетчатая полка из нержавеющей стали 59,6X60 см (23,4 "X24")
SSS-6060WH




Сетчатая полка из нержавеющей стали 29,6X60 см (11,6 "X24")
SSS-3060WH

Сопутствующие аксессуары

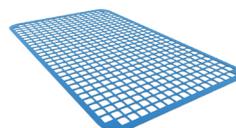

Нескользящий силиконовый коврик 42X25 см (16,5 "X 9,8")
SIMAT-250X420

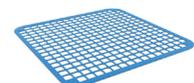

Нескользящий силиконовый коврик 25X25,5 см (9,8 "X10")
SIMAT-250X255



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

США / КАНАДА
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

ЕВРОПА / БЛИЖНИЙ ВОСТОК / АЗИЯ
Damzigt 13, 3454 PS De Meern
The Netherlands