

# APOLO

**TEGASUS**  
MEDICAL CONCEPTS INC.



## CARRELLI PER DEPOSITO E SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI

ANTA A SERRANDA

ANTA IN VETRO

ANTA SOLIDA

APERTI





# CARRELLI PER DEPOSITO E SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI

Pegasus Medical offre una linea completa di carrelli per il deposito e la somministrazione dei medicinali. La possibilità di combinare diversi tipi di chiusura, profondità e altezze fa della serie Apollo la soluzione ottimale per qualsiasi reparto ospedaliero.

4 soluzioni disponibili:

ANTA A SERRANDA

ANTA IN VETRO

ANTA SOLIDA

STRUTTURA APERTA

I contenitori sono inseriti orizzontalmente e basculano una volta estratti dal carrello.



## CARATTERISTICHE GENERALI

Compatibile con il sistema ISO 60-40.

Tutte le superfici sono di materiali polimerici, resistenti all'umidità.

Pannelli superiori in ABS, Pannelli inferiori in PP, pannelli laterali in PVC.

Compartimento interno facile da pulire grazie al pannello con auto drenaggio.

Ruote girevoli in gomma per il settore medicale di diametro 125 mm. 2 con e 2 senza freno.

Paraurti integrato a 360°.

Pannelli laterali ad alta capacità: un carrello standard di altezza 183 cm può contenere fino a 18 contenitori alti 5 cm o 11 contenitori alti 10 cm o 7 contenitori alti 20 cm.

Il telaio delle ruote è esterno al carrello per una maggiore stabilità.

Le ruote in plastica possono essere installate nei pannelli laterali per facilitare lo spostamento dei contenitori in caso di carichi importanti.

Per carichi superiori ai 15 kg è consigliato l'uso di guide telescopiche in acciaio inox di alta qualità sia insieme che in alternativa ai pannelli laterali.

TIPO E



TIPO U



# ANTA A SERRANDA

I CARRELLI CON ANTA A SERRANDA SONO  
PARTICOLARMENTE UTILI PER SPAZI PICCOLI.



CARRELLO APOLLO SINGOLO TIPO E  
APL-4.0E-TD



CARRELLO APOLLO DOPPIO TIPO UU  
APL-4.0UU-TD



## ECCELLENTE FUNZIONAMENTO


Nuovo sistema  
controbilanciato per un  
eccellente funzionamento  
della serranda.




## FACILE DA PULIRE

Serranda facile da  
rimuovere senza l'utilizzo  
di utensili per una facile e  
profonda pulizia.

## CASSETTIERA MODULARE

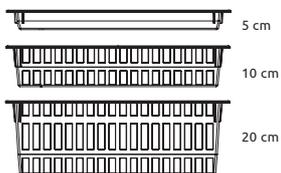

Cassettiera modulare per contenitori divisibili e vassoi.

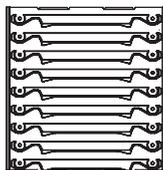

I carrelli Apollo con serranda sono disponibili in diverse altezze da 108 cm a 209 cm



### SICUREZZA ED ERGONOMIA

Diversi tipi di serrature sono disponibili: a codice, a chiave, a codice elettronico. Le serrature possono essere montate a metà o nella parte alta della serranda e possono essere programmate da remoto tramite rete wifi.

**CARRELLO TRIPLO APOLLO UUU**  
APL-4.0UUU-TD



### PARETE POSTERIORE

La parete posteriore evita che la serranda sia bloccata dai contenitori.



### ERGONOMIA

Una maniglia montata a metà altezza dell'anta facilita l'apertura della serranda.

# ANTA IN VETRO

LE ANTE IN VETRO SONO FACILI DA UTILIZZARE E DANNO UNA VISIONE CHIARA DEI PRODOTTI STOCCATI.



CARRELLO APOLLO SINGOLO TIPO U  
APL-4.0U-GD



CARRELLO APOLLO DOPPIO TIPO EE  
APL-2.0EE-GD



## ERGONOMIA


Maniglia integrata per tutta la lunghezza dell'anta all'interno dell'ingombro del carrello.




## A PROVA DI POLVERE

La sigillatura intorno al perimetro dell'anta previene l'accumulo di polvere e riduce gli impatti della porta.

## CASSETTIERA MODULARE

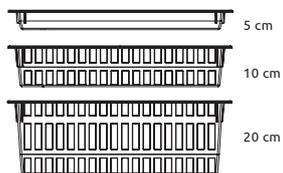

Modular drawer configurations, dividable baskets or solid trays

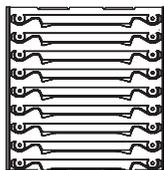

Glass door Apollo carts are offered in different heights from 108cm (42.5") to 209cm (82.5")



Vasta offerta di contenitori ISO 60-40 su richiesta:

- ANTIBATTERICI
- STERILI
- ABS
- TRASPARENTI IN PC

**CARRELLO APOLLO TRIPLO TIPO UUU**  
APL-4.0-UUU-GD



### CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Tutte le superfici sono auto drenanti per una facile pulizia. I carrelli sono disponibili anche in versione lavabile in lavastoviglie.



### VETRO DI QUALITÀ

Vetro temperato spesso 4 mm

# ANTA SOLIDA

LE ANTE SOLIDE SONO UTILIZZATE IN SPAZI FREQUENTATI DA PERSONALE NON OSPEDALIERO PER LIMITARE L'ACCESSO DEI PAZIENTI E DEI VISITATORI AI MEDICINALI.



**CARRELLO APOLLO SINGOLO TIPO E**  
APL-4.0E-SD



**CARRELLO APOLLO DOPPIO TIPO UU**  
APL-2.0UU-SD



## PANNELLO DA LAVORO SUPERIORE


Rimuovibile e lavabile, il pannello superiore del carrello Apollo con anta solida è un comodo piano di lavoro con alzatina anticaduta.




## ANTA SOLIDA IN HPL

Pannello in HPL spesso 4 mm

## CASSETTIERA MODULARE

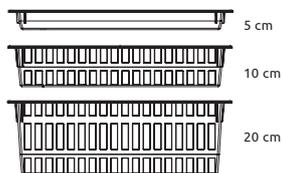

Cassettiera modulare per contenitori divisibili e vassoi.

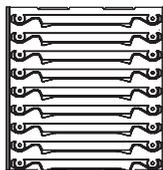

I carrelli Apollo con anta solida sono disponibili in diverse altezze da 108 cm a 209 cm



APOLLO EE DOUBLE CART  
APL-4.0EE-SD



### APERTURA A 270°

Il design unico della cerniera a scatto permette un'apertura a 270°.



### MANIGLIE COLORATE

Le maniglie colorate dei contenitori aumentano la visibilità e la soddisfazione del personale ospedaliero.

# CARRELLI APERTI

I CARRELLI APOLLO SENZA ANTA SONO USATI TIPICAMENTE IN SALE OPERATORIE, CENTRI DI STERILIZZAZIONE CON POCHISSIMA POLVERE O SALE CHIUSE A CHIAVE CON ACCESSO LIMITATO AL PERSONALE ADDETTO.

Le cassettiere sono compatibili con lo standard ISO e possono essere utilizzate con qualsiasi sistema di stoccaggio Tonon by Pegasus Medical.



CARRELLO APOLLO SINGOLO TIPO U  
APL-4.0U-ND



CARRELLO APOLLO DOPPIO TIPO EE  
APL-4.0EE-ND



## RUOTE DI QUALITÀ


Le ruote medicali Tente hanno un diametro di 125 mm




## PARAURTI

Sia nel carrello che nelle pareti

## CASSETTIERA MODULARE

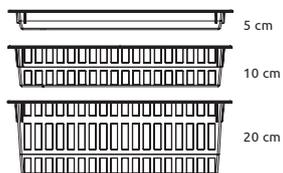

Cassettiera modulare per contenitori divisibili e vassoi.

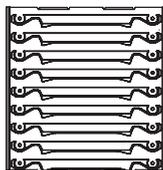

I carrelli Apollo aperti sono disponibili in diverse altezze da 108 cm a 209 cm.



**TUTTI I CARRELLI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON GUIDE TELESCOPICHE, PANNELLI LATERALI CON FUNZIONE BASCULANTE O ENTRAMBI.**

\* Non è possibile caricare più di 10 kg in un contenitore riposto su una guida telescopica ad un'altezza superiore a 140 cm.

**CARRELLO APOLLO TRIPLO TIPO UUU**  
APL-4.0UUU-ND



### GUIDA DIN PER ACCESSORI

Permette un facile montaggio degli accessori



### MANIGLIE


Maniglie ergonomiche laterali.

# DIMENSIONI DEI CARRELLI


## TIPO-E

I carrelli Tipo-E sono profondi 59 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.

**CARRELLO SINGOLO E**  
75 cm (30")

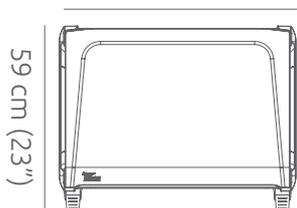


**CARRELLO DOPPIO EE**  
146 cm (58")

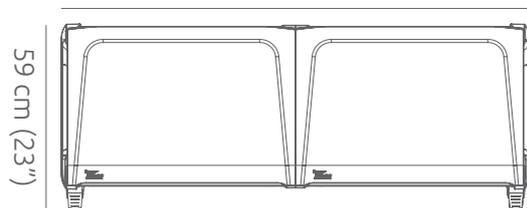


**Carrello con 2 pannelli**

Altezza: 109 cm  
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND

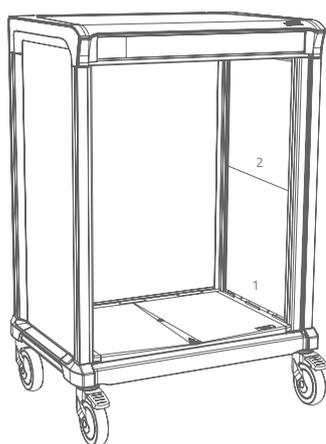


**Carrello con 3 pannelli**

Altezza: 146 cm  
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND

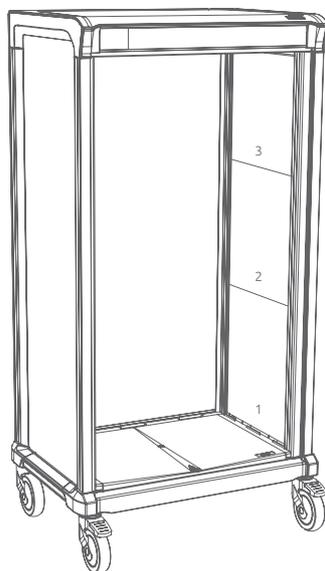


**Carrello con 4 pannelli**

Altezza: 184 cm  
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND

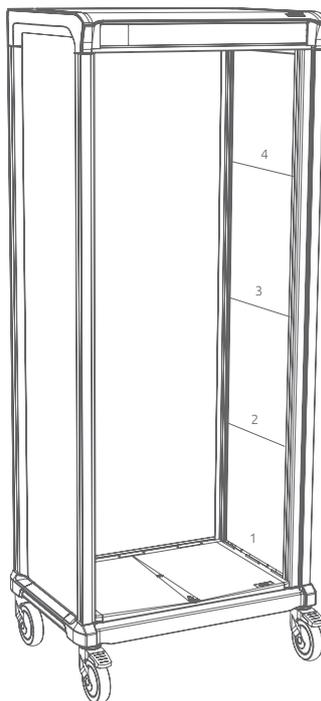

**Carrello con 4.6 pannelli**

Altezza: 209 cm  
APL-4.6E-TD/GD/SD/ND

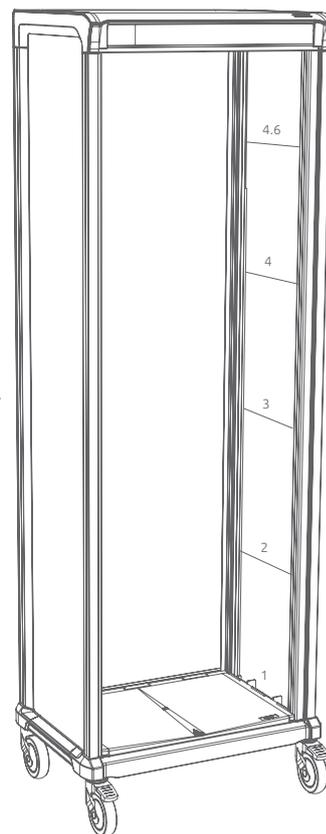

Capacità massima di contenitori per carrelli di Tipo-E e Tipo-U:


			2 PANNELLI	3 PANNELLI	4 PANNELLI	4.6 PANNELLI
20 cm		TD	3	5	7	8
		GD/SD/ND	3	5	7	8
10 cm		TD	5	8	11	13
		GD/SD/ND	6	9	12	14
5 cm		TD	8	13	17	20
		GD/SD/ND	9	13	18	21

TD - Anta a serranda    GD - Anta in Vetro    SD - Anta Solida    ND - Aperti


## TIPO-U

I carrelli Tipo-E sono profondi 79 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.

**CARRELLO SINGOLO U**  
55 cm (22")

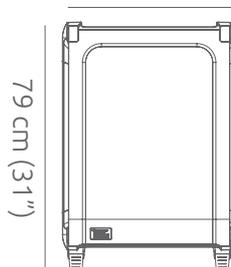


**CARRELLO DOPPIO UU**  
106 cm (42")

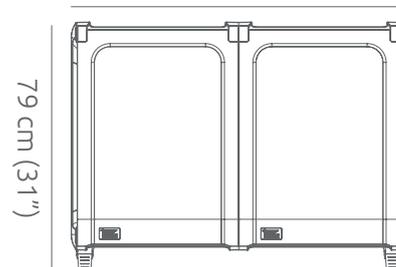


**Carrello con 4.6 pannelli**

Altezza: 209 cm (82.5")  
APL-4.6U-TD/GD/SD/ND

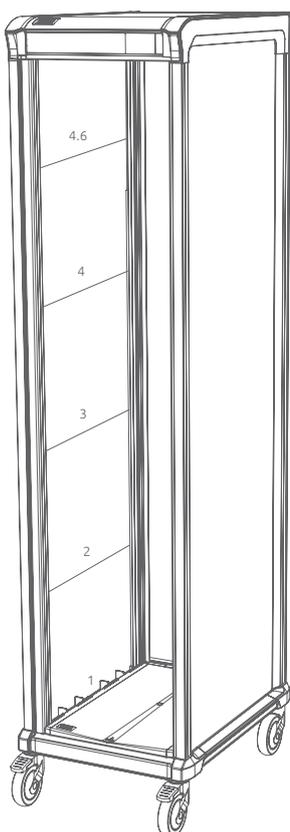


**Carrello con 4 pannelli**

Altezza: 184 cm (72")  
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND

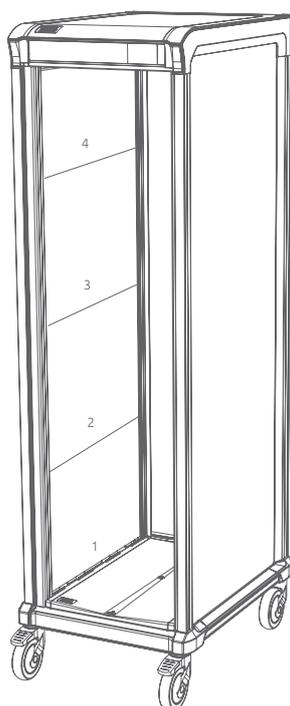


**Carrello con 3 pannelli**

Altezza: 146 cm (57")  
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND

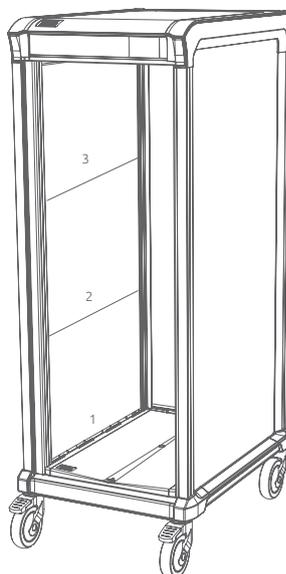

**Carrello con 2 pannelli**

Altezza: 109 cm (43")  
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND

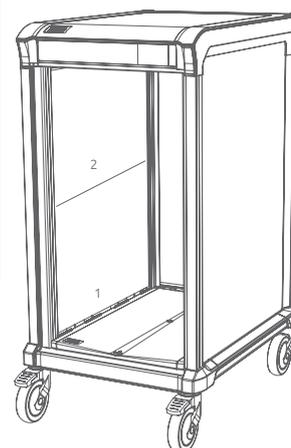



## CONTATTATECI PER MAGGIORI DETTAGLI

+1 888-276-4750 | [info@pegasusmedical.net](mailto:info@pegasusmedical.net) | [www.pegasusmedical.net](http://www.pegasusmedical.net)

USA / CANADA  
905 E. Rose St Lakeland  
FL 33801 - USA

EUROPE / MIDDLE EAST / ASIA  
Damzigt 13, 3454 PS De Meern  
The Netherlands